

チューブ

各種チューブ

(シングルルーメン、マルチルーメン、硬度変化)


●樹脂コーティング技術

シングルルーメンチューブ

各種樹脂を使用したチューブの生産が可能です。

外径（～φ5mm）は細いチューブを得意とし、薄肉での成形など対応可能です。

顔料	ナイロン PA エラストマー
	PE、PP
	ETFE、FEP、PFA
	TPU、PVC

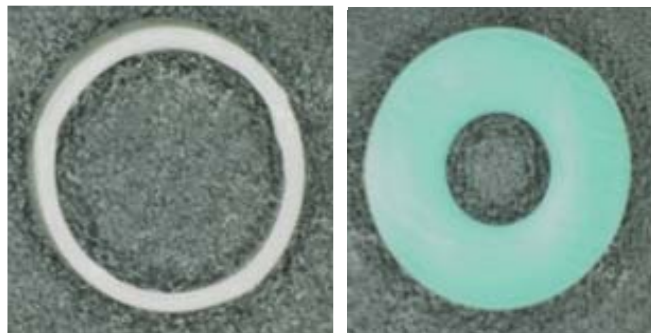

マルチルーメンチューブ

お客様のご要望に応じ、マルチルーメンチューブの生産が可能です。


※マルチルーメンはお客様毎の特注対応となり、専用の金型が必要となります。



2ルーメン



3ルーメン

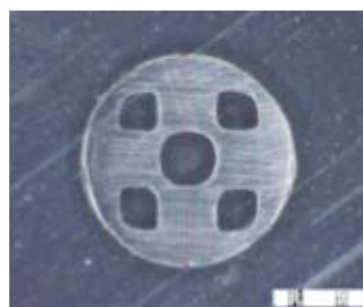

5ルーメン

硬度変化チューブ

硬度の違う2つの樹脂で堅硬部～柔軟部を一体成形することにより、連続的に硬度変化する特性を持ったチューブを生産することが可能です。

一般的な硬度変化チューブと違い、接合部が無いので、接合部からのキック、接合部の外径大が生じません。

